

MAGMA Vorwärmeofen

Ein echter Mehrwert für Ihr Labor weilschnell, zuverlässig, sauber, geräumig und langlebig.

- ✓ Vier-Seiten-Heizung
- ✓ Brennraumkapazität:
- ✓ 9x 3-er Muffeln
- ✓ 4x 6-er Muffeln + 3x 3-er Muffeln
- ✓ oder 3x 9-er Muffel
- ✓ 1900W Heizleistung
- ✓ 1100 °C max. Brennraumtemperatur
- ✓ Max. Aufheizgeschwindigkeit: 900 °C in 60 min.
- ✓ Gesteuerte Aufheizung zwischen 1 und 9 °C/min.
- ✓ 99 frei programmierbare Stufenprogramme
- ✓ 1 zusätzliches reines Speedprogramm
- ✓ Netzausfallerkennung mit Gangreserve
- ✓ während der gesamten Timervorlaufzeit
Gießzeitpunkt über Timer mit Datum und Uhrzeit programmierbar
- Außenmaße BxTxH = 43x45x50cm
Leistungsdaten: 230V/50Hz
Brennraumgröße BxTxH = 16x18x12cm



Inclusive Kamin

€ 1.629,-



Magma Katalysator (optional)

Der optionale Katalysator wird zentral vom Ofen aus gesteuert und intelligent in die Programme eingebunden. Im Standardprogramm wird der Katalysator ab 650 °C automatisch ausgeschaltet, was dessen Langlebigkeit dient. Manuell kann er wieder bis zum Programmablauf eingeschaltet werden. Wird das abgelaufene Programm nach dem akustischen Signal nicht ausgeschaltet, erwartet die Steuerung den Einsatz von Speed-Einbettmasse und startet daher den Katalysator wieder. Im Speed-Programm ist der Katalysator durchgehend im Betrieb.

€ 577,-

Vibrax Rüttler

- ✓ mit 4 Leistungsstufen
- ✓ keine Übertragung der Vibration auf die Arbeitsplatte
- ✓ Maße (BxHxT) 275x138x205 mm
- ✓ Ein/Aus Schalter zum Reinigen ablösbar
- ✓ Lieferumfang: Rüttler mit Gummiauflage
(ohne Vibrationskugel) € 59,-



Art.Nr. 015.11150

€ 347,-

Kavo K-Power Grip

Knie-Anlage komplett mit Handstück

(bis 50.000Up/min)

- ✓ minimalstes Laufgeräusch über den gesamten Drehzahlbereich
- ✓ Vibrationsfreier Antrieb
- ✓ schlankes Handstückkabel
- ✓ erhöhtes Drehmoment von 7,0 Ncm
- ✓ 20% kühleres Handstück

Art.Nr. 015.52120

komplett € 1.429,-




Kavo K-5

Knie-Anlage komplett mit Handstück

(bis 35.000Up/min)



- ✓ optimiertes Temperaturverhalten
- ✓ Multi-Funktionssteuergerät mit Digitalanzeige
- ✓ schlankes Handstückkabel
- ✓ leichtes und kurzes Handstück
- ✓ Links-/Rechtslaufumschaltung mit begrenzten Linkslauf auf 5.000 Up/min
- ✓ Einwellensystem mit nur zwei Kugellagern

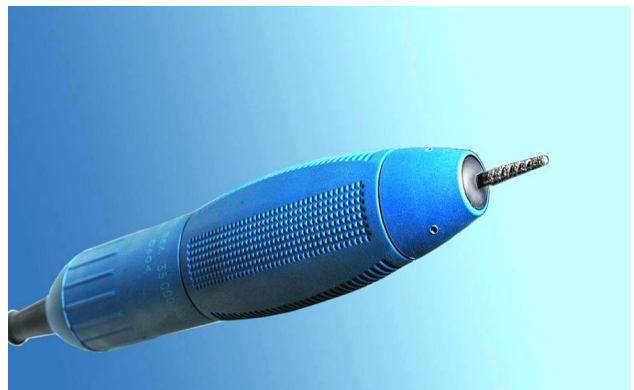

Art.Nr. 015.52120

komplett €1.149.-

Preise sind **gültig vom 01.07.07 – 31.07.07** und verstehen sich zuzügl. ges. Mwst. excl. Porto und Verpackung. Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen 2% Skonto, 30 Tage netto.

IMPRESSUM:

Herausgeber:
Wollner Dental GmbH
Gerd Wollner
Erlenstraße 36
90441 Nürnberg

www.wollner-dental.de

Tel: 0911 638031
Fax 0911 6383978
e-mail: info@wollner-dental.de

Geschäftsführer: Gerd Wollner
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 1335 45242
Handelsregister-Nr.: 6636

HAFTUNGSHINWEIS:

Die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die Wollner-Dental für zuverlässig hält. Dennoch ist die Haftung für Schäden, die aus der Heranziehung der Informationen für die eigene Kaufentscheidung des Lesers möglicherweise resultieren können, ausgeschlossen.